

THERAGUN

Wave Duo

Руководство


EAC

Wave Duo™

Для того, чтобы ознакомиться
с важными инструкциями по
технике безопасности, см. вкладку
«Предупреждения»

Умный вибрирующий массажный
валик от создателей Theragun.

- А Светодиодный индикатор батареи
- В Светодиодный индикатор скорости
- С Зарядный порт USB-C

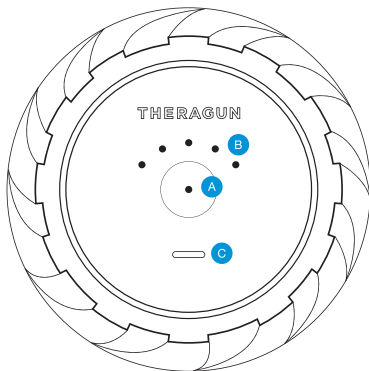

Использование Wave Duo

1. Чтобы включить Wave Duo, зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1–2 секунд.
2. Нажмите главную кнопку, чтобы увеличить скорость. После достижения самой высокой скорости при повторном нажатии кнопки Wave Duo вернется к самой низкой скорости.
3. Расположите устройство на обрабатываемой области, постепенно применяя от легкого до умеренного давления по мере необходимости.
4. Чтобы выключить Wave Duo, зажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится.

Smart-характеристики

Wave Duo — это smart-устройство с поддержкой Bluetooth, разработанное для безупречной работы с приложением Therabody. После загрузки приложения вы пройдете пошаговую настройку и узнаете, как подключить ваше устройство.



Сканируя QR-код
Начало.



Зарядка Wave Duo

1. Wave Duo поддерживает зарядку через USB-C. Для зарядки подключите кабель к вашему USB-адаптеру. Wave Duo поддерживает быструю зарядку и может заряжаться напрямую через зарядное устройство USB-C (продается отдельно) для более быстрой зарядки.
2. Светодиодный индикатор на кнопке питания будет мигать до полной зарядки.
3. Зарядка завершена, если светодиодный индикатор на кнопке питания горит зеленым цветом.
4. Уровень заряда батареи отображается на светодиодном индикаторе кнопки питания постоянно, когда устройство включено. Чтобы посмотреть уровень заряда батареи на выключенном устройстве, коротко нажмите на кнопку питания, и светодиодный индикатор батареи замигает, показывая уровень заряда батареи.

Не используйте очистители на спиртовой основе.

THERAGUN

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for every**body**.



@Therabody