

# **THERAGUN**


Wave Roller

# Wave Roller

Умный вибрирующий массажный цилиндр от создателей Theragun.

Для того, чтобы ознакомиться с важными инструкциями по технике безопасности, см. документ «Предупреждения»

- A Кнопки изменения скорости «плюс» и «минус»
- B Светодиодный индикатор батареи
- C Светодиодный индикатор скорости
- D Разъем для зарядки

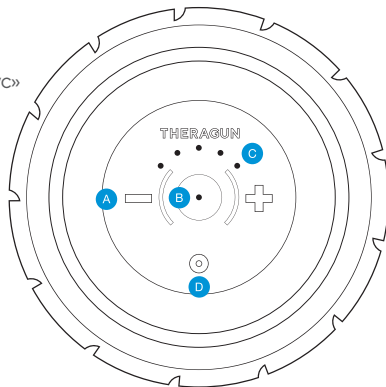

## Использование Wave Roller

1. Чтобы включить Wave Roller, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1–2 секунд.
2. Wave Roller начнет работу на самой низкой из пяти скоростей. Для увеличения скорости нажимайте на кнопку «плюс» до активирования нужной скорости.
3. Расположите устройство на обрабатываемой области, постепенно применяя от легкого до умеренного давления по мере необходимости.
4. Чтобы выключить Wave Roller, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится.

RU

## Smart-характеристики

Wave Roller — это smart-устройство с поддержкой Bluetooth, разработанное для безупречной работы с приложением Therabody. После загрузки приложения вы пройдете пошаговую настройку и узнаете, как подключить ваше устройство.



Для перехода  
к приложению  
сканируйте  
QR-код:







## Зарядка Wave Roller

1. Выключите устройство и подключите адаптер к разъему для зарядки.
2. Светодиодный индикатор на кнопке питания будет мигать до полной зарядки.
3. Зарядка завершена, если светодиодный индикатор на кнопке питания непрерывно горит зеленым цветом.
4. Уровень заряда батареи отображается на светодиодном индикаторе кнопки питания постоянно, когда устройство включено. Чтобы посмотреть уровень заряда батареи на выключенном устройстве, кратковременно нажмите на кнопку питания, и светодиодный индикатор батареи замигает, показывая уровень заряда батареи.

## Беспроводная зарядка Wave Roller

Уровень заряда батареи в Wave Roller отображается следующими цветами:

-  **Мигает красным:** низкий уровень заряда
-  **Мигает синим:** средний уровень заряда
-  **Мигает зеленым:** высокий уровень заряда
-  **Горит зеленым, не мигая:** полностью заряжена

# THERAGUN

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.  
Designed for every**body**.



@Therabody